

サンプル流失防止機能付きポリープトラップ




サンプル流失防止機能付きポリープトラップ

検体をチャンバー外に吸引しても流失を予防する
防止ネット構造

内視鏡と吸引装置の間にキャニスターを接続する
だけで簡単にご使用頂けるポリープ回収システムです。

独立した検体回収チャンバー

検体確認が容易なナンバー表示！

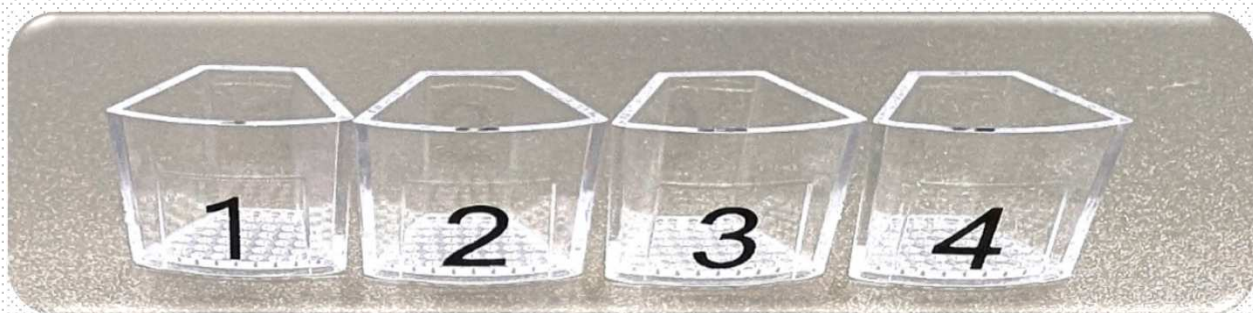

- ・ポリープトラップは取り出し可能な4個の独立したチャンバーになっています。
- ・回収した検体の安全な取り扱いをサポートします。
- ・**素材は透明なポリカーボネイト製ボディで採取した組織の視認も容易に行えます。**



意図しない蓋の外れを予防するロック構造付

検体採取容器は、内視鏡と吸引装置との間に簡単に取付けられるように設計されており、回収した内視鏡排水からポリープを探し出す必要がありません。

取り外し可能な4個のチャンバーは、内視鏡チャンネルを介して採取されるポリープを収集し、大きくて見やすい番号付きチャンバーにより、各ポリープを正確に識別でき、クリアーなボディー構造により、暗い内視鏡検査室でポリープを視覚的に検証できます。

- ・流失防止機能付きトラップ
- ・衛生的な個別包装で単回使用
- ・感染防止管理に貢献
- ・視認性のよいクリアーな素材
- ・装着が簡単
- ・カッチリとした回転操作感



独立したチャンバーは、検査による排水との接触を低減または排除し、面倒な回収作業から解放されます。

JANコード	4589537940912
型番	SBP-60-A
入数	25個/箱

【製造販売業者】

Shoei Japan Co.,Ltd.

湘栄ジャパン株式会社

〒545-0011
大阪市阿倍野区昭和町2-19-28

Tel. 06-6627-1611
Fax. 06-6627-1612

<http://www.shoeijapan.co.jp>

【販売業者】



Shoei Japan